


Arnés para hombro estilo H

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PARA EL USUARIO

ART NO. SH224

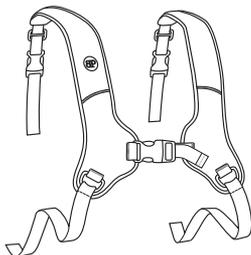

Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso y mantenimiento seguros de todos los arneses para hombro estilo H Bodypoint. Entregue estas instrucciones al usuario o a la persona que le atienda y revíselas para asegurarse de que se comprendan.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

Para su instalación, este producto debe montarse con uno o más de los siguientes artículos:

- Acoples terminales Flat-Mount™
- Acoples terminales Cinch-Mount™
- Hebillas de leva (aptas para personas de hasta 75 kg)

El herraje de montaje opcional del cinturón Bodypoint también puede utilizarse para sillas de ruedas y sistemas de asiento.

USO PREVISTO:

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Debido al riesgo de estrangulación, es peligroso usar este producto sin estabilizar la pelvis: utilícelo siempre con un cinturón de soporte pélvico correctamente ajustado.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Este producto solo deberá usarse para colocar a una persona en una silla de ruedas. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento podría causarles lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Este arnés debe ajustarse correctamente para brindar soporte al tronco y los hombros del usuario sin causar lesiones. Pídale a su especialista postural que le muestre la forma correcta de ajuste y uso.

- Un arnés demasiado ajustado puede limitar la respiración y aumentar la presión en los hombros y el pecho.
- Un arnés demasiado flojo podría permitir que el usuario se deslice y crear un riesgo de estrangulamiento.
- La liberación accidental de este arnés para hombro podría provocar que el usuario se caiga hacia adelante.
- La incapacidad de un usuario para soltarse por sí mismo puede ser peligrosa si se desliza hacia abajo o queda atrapado en la silla durante una emergencia.

Si las habilidades físicas o cognitivas del usuario podrían impedirle utilizar este arnés de manera segura, un cuidador debe estar presente en todo momento durante su uso. Asegúrese de que todos los cuidadores sepan ajustar y desabrochar el producto de manera correcta.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! De igual forma que con cualquier nuevo soporte para asientos, este producto puede cambiar

la forma de sentarse del usuario. Los usuarios deben continuar con sus actividades normales de alivio de presión y controles de integridad cutánea, no solo en los lugares de contacto del producto, sino también en las zonas de presión principales, como el sacro, las piernas y las nalgas. Si se produce un mayor enrojecimiento o irritación de la piel, no continúe usando el producto y consulte con su médico o especialista postural. De no hacerlo pueden producirse lesiones graves, como las escaras de decúbito.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO:

Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo en las hebillas, los puntos de montaje, la cincha, las almohadillas o las costuras, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.



LIMPIEZA: Lavar a máquina con agua caliente a 60 °C (140 °F). No usar lejía. Secar en secadora a baja temperatura o escurrir. No planchar. (Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela durante el lavado ayudará a evitar rasgaduras al producto y a la propia lavadora).

RESTOS/DESECHOS: El producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada para toda la vida por defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el usuario original. Contáctese con su proveedor o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.

Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE. UU., visite la página www.bodypoint.com.

BP Bodypoint®


EC REP

Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands

CE


MD Producto sanitario

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

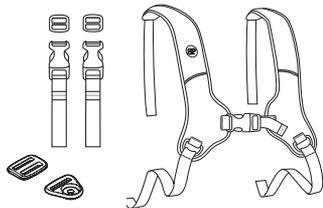

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Arnés para hombro
- Correas superiores desmontables con ajustadores deslizantes de 3 barras (2)
- Acoples terminales Flat-Mount™ (4)

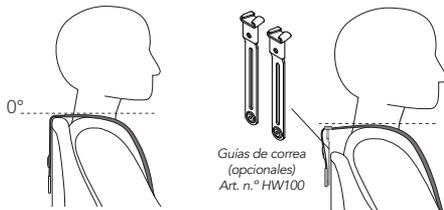


REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

1. Silla de ruedas con un respaldo sólido o guías de correa colocadas aproximadamente a la altura del hombro (ajuste hacia arriba/abajo para distribuir la presión).
2. Tornillos de montaje, con $\varnothing 5-6$ mm (3/16-1/4 in) de diámetro y una resistencia a la extracción mínima de 90 kg (200 lb). No incluidos en el paquete.



AJUSTE


1. Siente al usuario en la silla de ruedas y establezca la postura correcta con el **cinturón de soporte pélvico** (no incluido).
2. Coloque el arnés para hombro sobre el pecho con almohadillas sobre la parte superior de los hombros y las correas superiores sobre el respaldo. Coloque las correas entre el cuello y la articulación del hombro.
3. Centre la correa del esternón con hebilla en el esternón y ajuste el espacio entre las almohadillas, según sea necesario.
4. Ajuste la posición del arnés hacia arriba/abajo para distribuir la presión uniformemente a lo largo de la caja torácica y los hombros.

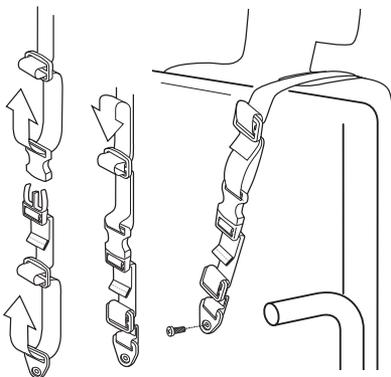

¡ADVERTENCIA! No coloque la hebilla de la correa superior sobre el respaldo. Bajo tensión, la correa se puede desajustar y provocar que el usuario caiga hacia delante.


INSTALACIÓN DE LA CORREA SUPERIOR

1. Utilizando los ajustadores deslizantes de 3 barras, ensamble las correas superiores desmontables al arnés y los acoples terminales.
2. Ajuste cada correa del hombro para que quede cómoda, según el ancho de hombro del usuario y su posición de sentado. Marque los tornillos de montaje para mantener esta posición.
3. Sujete las correas superiores desmontables al respaldo con sujetadores adecuados.
4. Con el usuario colocado correctamente en la silla, ajuste las correas superiores para colocar las almohadillas y sujetar al usuario de forma apropiada.

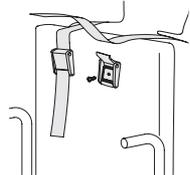

OPCIÓN DE MONTAJE DIRECTO

Sujete la hebilla de leva (art. n.º FS032-2; no incluida) al respaldo usando los sujetadores apropiados. Pase la cincha por la hebilla. Apta para usuarios de hasta 75 kg.

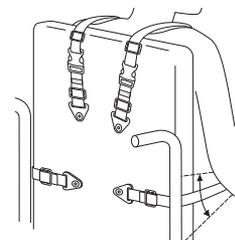

INSTALACIÓN DE LA CORREA INFERIOR

1. Enrolle las correas inferiores alrededor del respaldo entre la costilla inferior y el asiento sin obstruir los otros dispositivos de la silla de ruedas.
2. Monte las correas al respaldo usando sujetadores y acoples terminales Bodypoint apropiados.
3. Con el usuario colocado correctamente en la silla, ajuste las correas inferiores para evitar que se suba la correa del esternón.

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

Cuando el usuario esté correctamente sentado en la silla de ruedas, pídale que se incline hacia delante y a los lados para comprobar el ajuste del cinturón. Compruebe:

1. El funcionamiento normal de las hebillas y las correas de ajuste.
2. Comodidad: en el caso de que roce el cuello, vuelva a colocar las correas superiores.
3. Posición: si está demasiado alto o demasiado bajo, ajuste las correas inferiores.
4. Interferencia con otros dispositivos: cambie la posición de las correas según sea necesario para que no interfieran con el mecanismo de inclinación del asiento, los reposabrazos, las almohadillas complementarias o las sondas de alimentación.

